



PANELE MEDYCZNE

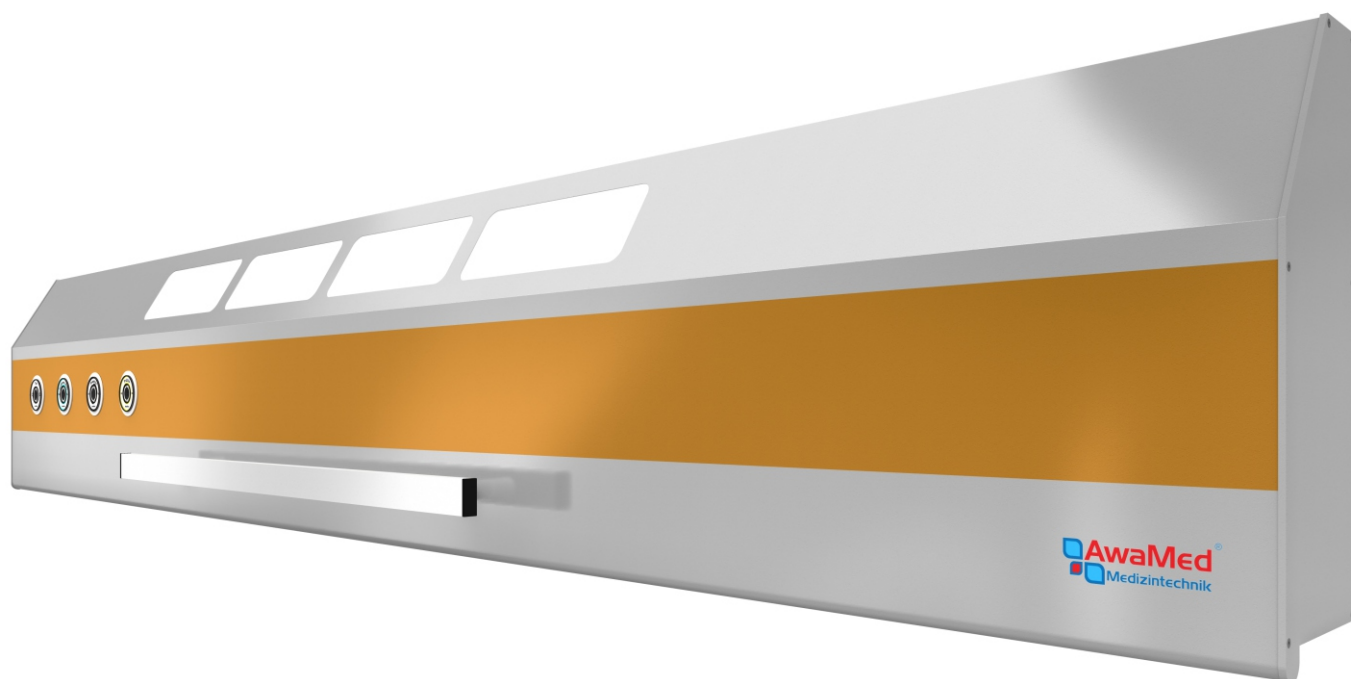

KARTA KATALOGOWA

Panel medyczny jedno stanowiskowy  
**AWA Classic 19**

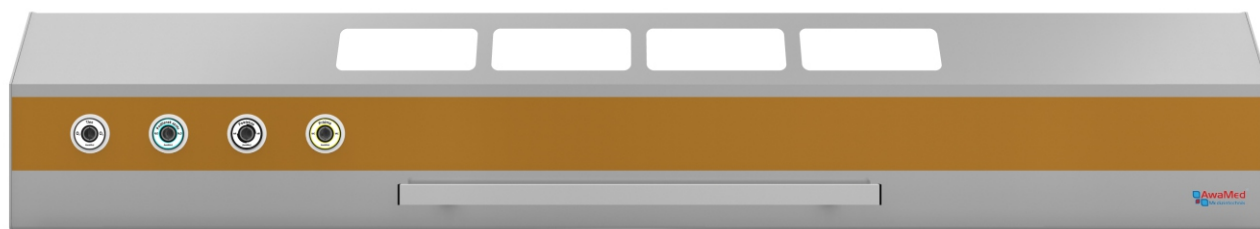

### SPECYFIKACJA:

- panel jednostanowiskowy, lub wielostanowiskowy,
- profil wykonany z aluminium,
- możliwość malowania proszkowego w kolorze z palety RAL lub kolory anodowane,
- dedykowany kanał dla punktów poboru gazów medycznych w systemie AGA lub DIN,
- przygotowanie do systemu przyzywowego,
- dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czola ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu z e ściany,
- możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej,

### WYPOSAŻENIE PANELA:

#### GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH

- wykonane w standardzie DIN lub AGA,
- zamontowane po stronie monitoringu-wentylacji,
- ilość punktów poboru gazów do 15 na stanowisko.

#### GNIAZDA ELEKTRYCZNE

- zlicowane z powierzchnią obudowy lub nadbudowane,
- wykonanie w module francuskim 45mm x 45mm,

#### SYSTEM PRZYZYWOWY

- przygotowanie otworu dla gniazda systemu przyzywowego,

#### GNIAZDA TELEKOMUNIKACYJNE

- gniazda komputerowe RJ45, RJ11

#### OŚWIETLENIE SALI

- oświetlenie ogólne np. T5, 2G11, o mocy pojedynczej świetlówki od 18W do 80W lub pełne oświetlenie LED, załączane wyłącznikiem na panelu,

#### OŚWIETLENIE PACJENTA

- oświetlenie o mocy 18W, 2G11 24W, 36W lub LED załączane wyłącznikiem na panelu, lub manipulatorem systemu przyzywowego [opcja],

#### OŚWIETLENIE MIEJSCOWE

- oświetlenie od 2W do 5W załączane wyłącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyzywowego [opcja].

#### Gwarancja producenta:



- 24 miesiące



#### Uwaga!

Przedstawiony model panelu jest modelem uniwersalnym jednostanowiskowym. Wszystkie elementy, są zawsze indywidualnie dobierane przez Zamawiającego.

### Kanały:


- kanał A przeznaczony na instalację elektryczną: oświetlenie górne,
- kanał B przeznaczony na instalację punktów poboru gazów medycznych.
- kanał C przeznaczony na instalację elektryczną: oświetlenie dolne i gniazda elektryczne,

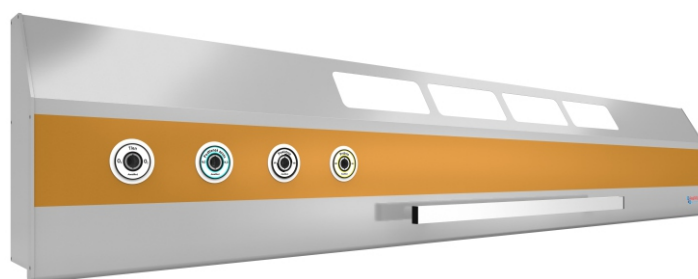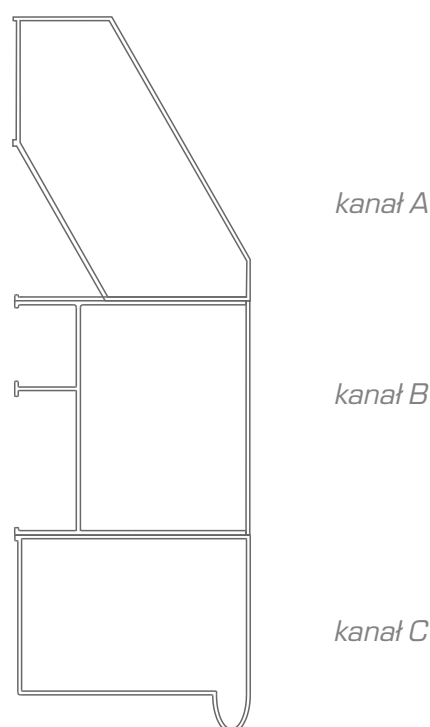

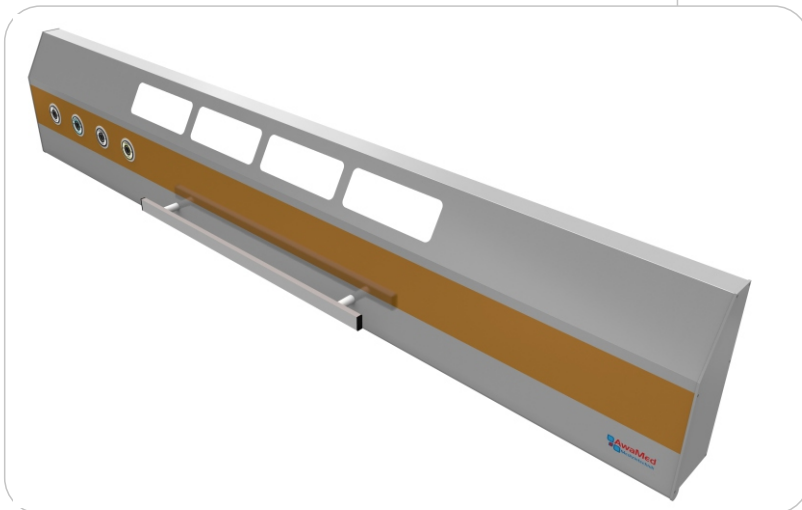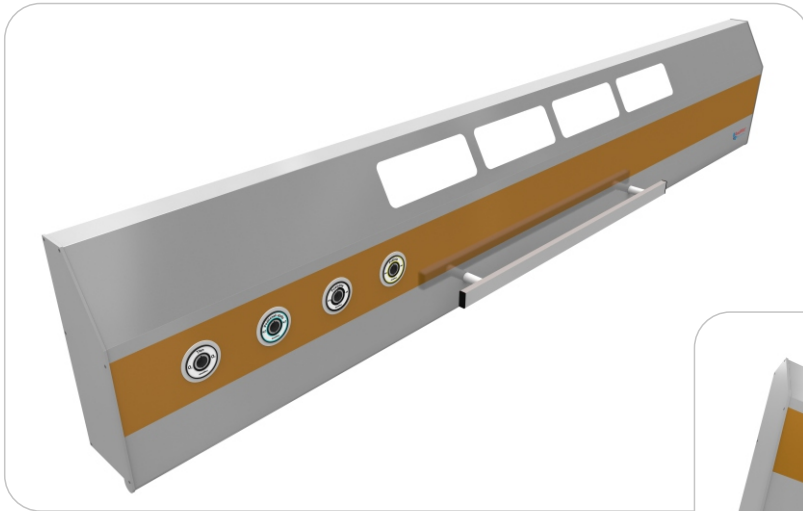

## PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE



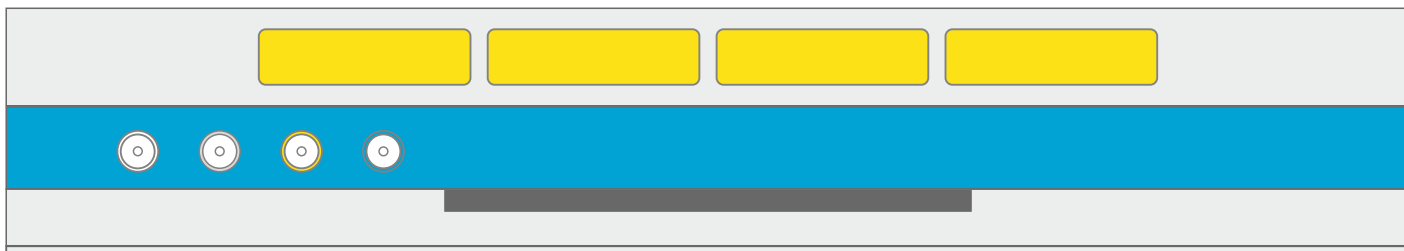



Widok od frontu



Widok z dołu



## LEGENDA

-  gniazdo wtyczkowe z uziemieniem
-  gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem
-  gniazdo wyrównania potencjałów
-  gniazdo komputerowe RJ45 podwójne
-  włącznik oświetlenia
-  gniazdo systemu przyzywowego

-  świetlówka
-  szyna medyczna
-  tlen
-  podtlenek azotu
-  powietrze
-  próżnia

## POLECAMY dozowniki



## POLECAMY ssaki



## POLECAMY pojemniki



INSTALACJA



DORADZTWO



ANALIZA



PROJEKTOWANIE



GWARANCJA



SERWIS



ATESTACJA